

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	표준온도계		
SOP No.	IAI/EQM/001	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

표준온도계의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.


2. 기기 및 형식

모델명	제조사	설치장소
SK-1260	SATO	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 표준온도계

(1) 외관

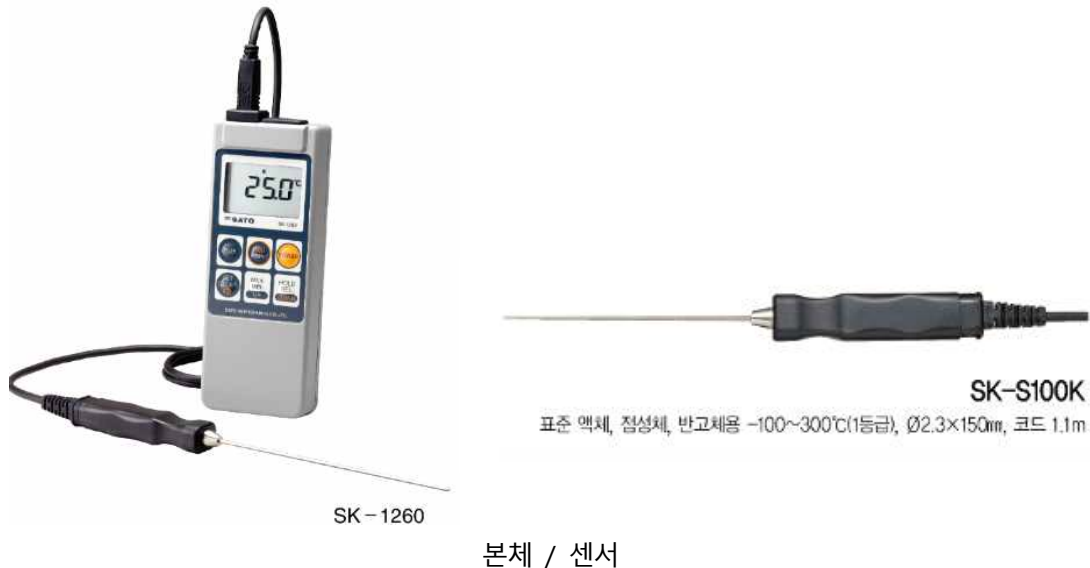

(2) 온도범위 : -99.9 ~ 1250 °C

(3) 온도 분해능 : -99.9~199.9 °C에서 0.1 °C / 200~1250 °C에서 1°C

(4) 온도 정확도 : 본체-0.0~199.9°C에서 ± (지시치의 0.1%+0.3)°C

센서-1등급(JIS): 센서정확도는 옵션 센서기종에 따라 다름 -40°C~375°C에서
±1.5°C / 375°C~1000°C에서 ±0.004

(5) 전원 : 1.5V 건전지 4개

(6) 크기 / 무게 : 66×175×25mm / 약 200g

4. 작동 방법

4.1. 표준온도계

(1) 표준온도계의 윗부분에 온도센서를 연결한다.

- (2) 표준온도계의 POWER 버튼을 누른다.
- (3) 온도센서를 측정하고자 하는 위치에 고정한다.
- (4) DISPLAY에 나타나는 측정값을 확인한다.
- (5) 사용 종료 후 POWER 버튼과 SET CLEAR 버튼을 동시에 누른 후, SET CLEAR 버튼을 한번 더 누르면 모든 데이터는 지워진다.
- (6) 종료는 역순으로 한다.

5. 관리방법

5.1. 배터리 교환

소진된 배터리를 새로운 1.5 볼트 배터리 4개를 사용하여 배터리를 교체한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	온도(°C)	성적서	1회/년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

연 1회 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.

7. 첨부문서

없음.