

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	버니어캘리퍼스		
SOP No.	IAI/EQM/016	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 사용 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적


버니어캘리퍼스의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
버니어캘리퍼스	Digital caliper	삼원티에프	어류실험실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관 및 구성

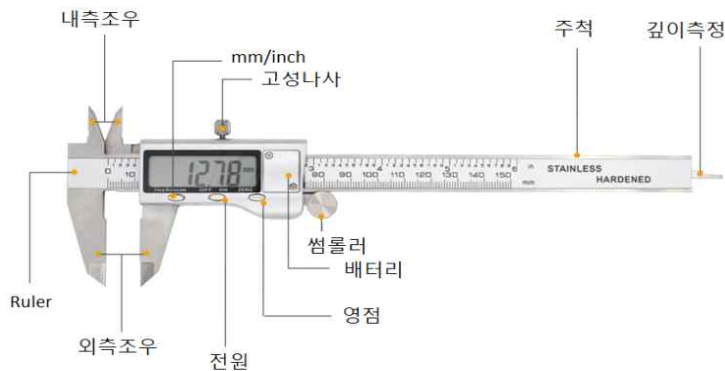

3.2. 측정범위 : 0 ~ 150mm / 0 ~ 6inch

3.3. 표시단위 : 0.1mm / 0.01inch

3.4. 측정오차 : $\pm 0.2\text{mm}$

3.5. 전원 : LR44(1.5V) / 1개(별도)

3.6. 작동환경 : 0 ~ 40 °C

4. 사용 방법

- (1) 사용전 조우를 닦은 후 완전히 닫아준다.
- (2) 완전히 닫은 후 on/off 버튼을 눌러 전원을 켜준다.
- (3) ZERO버튼을 누른 후 영점을 맞춘다.
- (4) 슬라이더를 돌려 길이를 측정한다.

5. 관리방법

- (1) 사용 전 · 후로 조우를 닦는다.
- (2) 사용하지 않을 때는 케이스에 담아 보관한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	파손여부	파손없음	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
정기점검	계측기검사	성적서	1회/년	기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

기기의 내외부 파손 여부를 확인

6.2.2. 정기점검

연 1회 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다

7. 첨부문서

없음.