

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	분액 여두 진탕기		
SOP No.	IAI/EQM/048	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2026.01.16.	제정	하대망	신규 장비 도입을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	5
5. 관리 방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

액-액 추출 및 혼합 공정을 안전하고 재현성 있게 수행하기 위함이다.


2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
분액 여두 진탕기	MMV-1000W	EYELA

3. 외관



분액 여두 진탕기 (MMV-1000W / EYELA)

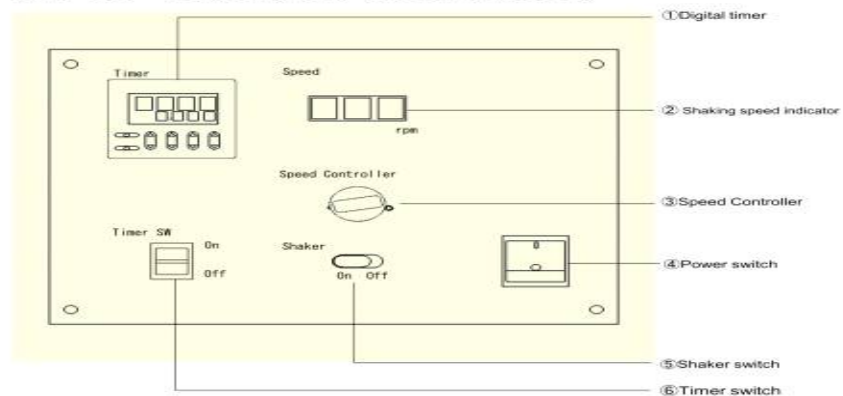

No	Name	Function
①	Digital timer	진탕 시간 설정 범위 1 초~99 분 59 초
②	Shaking speed indicator	진탕 시간 표시
③	Speed controller	진탕 속도 설정
④	Power switch	전원 on / off
⑤	Shaker switch	ON 시 진탕 개시, OFF 시 진탕 정지
⑥	Timer switch	ON 시 타이머 개시, 연속사용시 OFF 설정

4. 작동 방법

4.1. 전원 켜기 및 준비

- (1) 장비를 평평하고 진동이 없는 장소에 설치한다.
- (2) 전원 케이블이 콘센트(220V)에 올바르게 연결되었는지 확인한다.
- (3) 시료가 담긴 분액여두를 진탕기 클램프에 고정한다.

4.2. 기기 작동

- (1) 기기 본체의 전원 스위치를 켜다.
- (2) 속도 조절 버튼을 통해 설정한다.
- (3) 필요한 경우 타이머를 설정한다.

4.3. 작동 중지 및 회수

- (1) 설정된 시간이 지나거나 혼합이 완료되었는지 확인한다.
- (2) 회전이 완전히 멈춘 것을 확인한 후 전원을 끈다.

5. 관리방법

- (1) 시료가 묻었을 경우 즉시 닦아내며, 부드러운 천에 중성세제나 알코올을 묻혀 닦는다. 유기 용매 사용 시 플라스틱 부품이 손상되지 않도록 주의한다.
- (2) 분액여두를 잡아주는 클램프가 헐거워지거나 파손되지 않았는지 확인하고, 필요 시 교체한다.
- (3) 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 분리하여 보관한다.

6. 점검

없음.

7. 첨부문서

없음.